

Bölüm A: İlk Kurulum

NanoCam 4K/Go ile birlikte şunlar gelir: Ayak pedalı, pedal USB alıcısı, USB kablo, USB uzatma kablosu, mavi başlıklı alyan anahtar

- DBR yazılımı, kameranızla verilen Designs for Vision krom kapaklı USB belleğin içinde yüklü gelir.
- DBR yazılımı sizde zaten varsa, sürümün 1.1.3 olduğundan emin olun.
-



Bölüm B: Ayak Pedalının Kurulumu

Ayak pedalı kablesuz bir Bluetooth modülüyle çalışır. Modülü en yakın USB bağlantı noktasına takmalısınız.

Pedalı çalıştırmak için Bluetooth alıcısını cihazınızın USB girişine takın (aşağıdaki gibi):



(Not: cihazınızda USB C girişi varsa USB C - USB A adaptörü kullanmanız gerekir. Cihazınızda tek USB girişi varsa ayrıca bir USB çoklayıcı gerekebilir)

Kullanmadan önce pedalın düzgün çalıştığını sınavabilirsiniz. Pedal, DBR yazılımıyla çalışacak şekilde ayarlıdır. Kameranızı kurulumunuza göre USB girişine veya adaptöre takın. **Kamera takılı değilken pedal çalışmaz.**


- Pedalın sol tarafına basınca video kaydı yapılır. Başlatmak için bir kez, durdurmak için bir kez daha basın.
- Pedalın sağ tarafına basınca fotoğraf çekilir. Kayıt sürerken de fotoğraf çekebilirsiniz.





Kayıt/Durdur

Fotoğraf Çek

Bölüm C: Kameranın Kurulumu

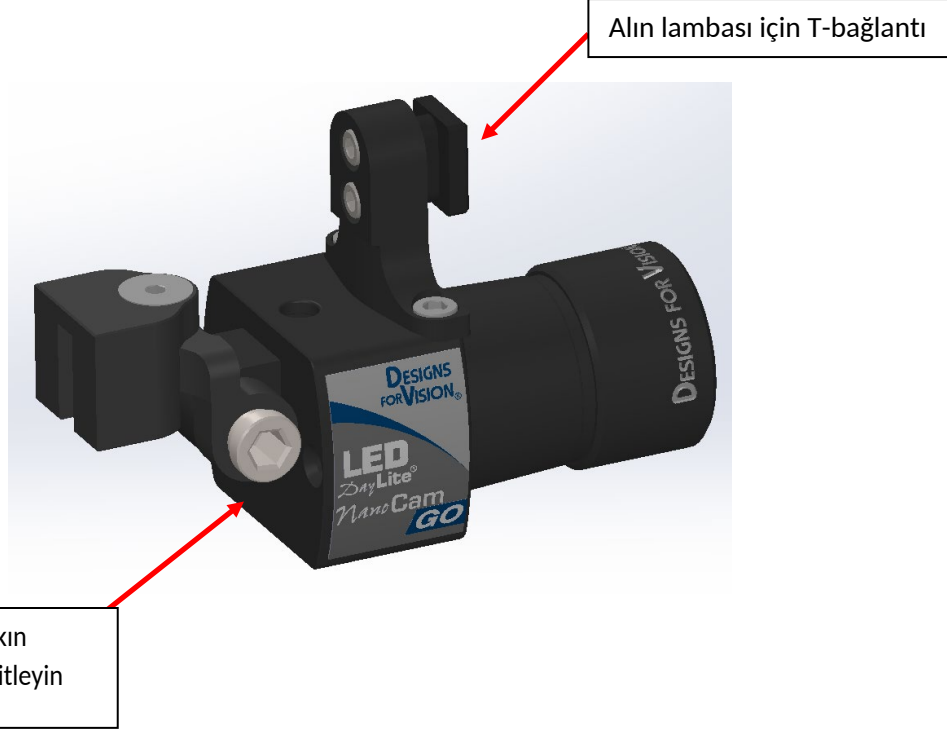

Bölüm D: Yazılım Ayarları

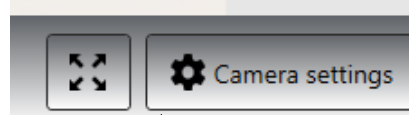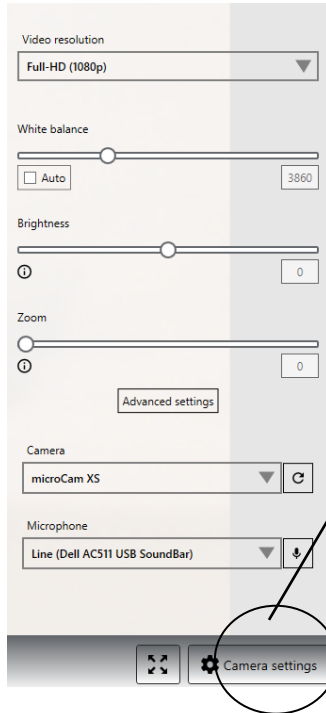

- Kamera ayarlarını değiştirmek için ekranın sağ alt köşesindeki kamera ayarları düğmesine tıklayın
- Kamera ayarları penceresinde, tüm parametreleri açmak için Advanced Settings'e tıklayın
- Advanced Settings içinde iki sekme vardır: Video Proc ve Camera Control
- İstemediğiniz bir değişiklik olursa, Default düğmesine tıklayarak ayarları geri alabilirsiniz

Properties

Video Proc Amp Camera Control

Brightness ☐ Auto

Contrast ☐ Auto

Hue ☐ Auto

Saturation ☐ Auto

Sharpness ☐ Auto

Gamma ☐ Auto

White Balance ☐ Auto

Backlight Comp ☐ Auto

Gain ☐ Auto

ColorEnable ☐ PowerLine Frequency (Anti Flicker)

Default

OK Cancel Apply

- Herhangi bir ayarı değiştirdiğinizde, kaydetmek için **Apply** düğmesine tıklamalısınız
- Camera Control sekmesinde pozlamayı ayarlamak için
 1. Auto kutusunun işaretini kaldırın
 2. Pozlamayı istediğiniz değere getirin
 3. Auto kutusuna yeniden tıklayın, işaretli duruma gelmeli
 4. Apply düğmesine tıklayın

Önerilen Mavi Işık Ayarları:

NanoCam 4K

- Pozlama -10 olmalı
- Auto Exposure kutusu işaretli

NanoCam Go:

- Ana kamera ayarları penceresinde White Balance Auto konumunda (değer 4600)
- Camera Control sekmesinde pozlama -7 olmalı
- Auto Exposure işaretli

Properties

Video Proc Amp Camera Control

Zoom ☐ Auto

Focus ☒ Auto

Exposure ☒ Auto

Aperture (Iris) ☐ Auto

Pan ☐ Auto

Tilt ☐ Auto

Roll ☐ Auto

Low Light Compensation ☒

Default

OK Cancel Apply